


Wisd Ultra- Tiefkühlschrank

• Robuster und flexibler Türgriff mit Sperrfunktion



• Kabelanschluss für externen Temperatursensor

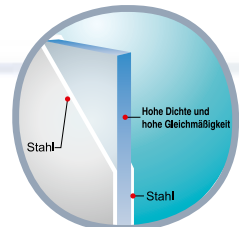

• Entfroston der Außenfläche durch Isolierplatte in Gehäuse und Tür



• Signalklemme für externes Temperaturwarnsystem

• Filterloses System
Deutliche geringere Wärmeenergie durch Kompressor
Blockkondensator (ohne Stifte)
macht Filter überflüssig

• Einfaches Öffnen der Tür durch automatischen Vakuumdissolver




• Perfekte Isolierung durch dreilagige Dichtung



• Innentürgriff - trotz tiefer Temperaturen einfach zu öffnen



• Innentür-Isoliermaterial

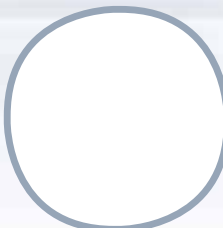

• SmartLab™-Steuerung
- Einfache Einstellung, Temperaturkurve, Speicherfunktion (USB-Schnittstelle) usw.



• FCKW-frei
Verwendung von H-FKW-Kältemitteln

• Wartungsfreies Kühlgerät mit hermetischem Kompressor hoher Kapazität

• Alarm
Mit normalen Warn- und Alarmfunktionen




• Standard-Hilfsbatteriesystem für Datenlogger und Alarmsystem

SWUF - D350C

※ Produktdesign wird geändert

SWUF - D300


• Temperaturrecorder (optional) mit großer und auffälliger LED

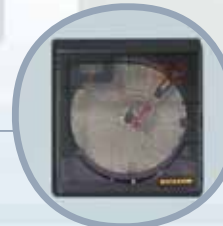

Vergleich des Innenaufbaus: Neue SHFS™-Technologie vs Konkurrenzprodukte



► Kompliziertes hintereinandergeschaltetes System

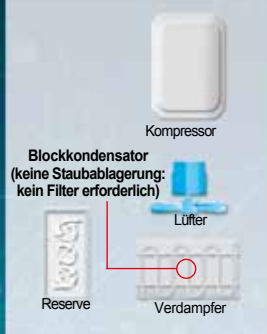

► Innovativer SHFS™

- Vereinfachtes hocheffizientes Gefriersystem
- Wesentlich einfacher
- Ohne Ölabscheider und Ausdehnungsbehälter
- Blockkondensator vs typischer Dampfkondensator mit Stiften - staubfrei, kein Filter

► Gestellsystem



Innenaufbau

- A Die hochwertige geformte Wärmeisolierung zwischen Gehäuse und Kammer stellt die Stabilität der Innentemperatur sicher und minimiert die Vereisung.
- B Zur Verbesserung der Wärmeisolierung und zur effizienten Nutzung der Kammer sind vier Innentüren vorgesehen. Da sie aus pulverbeschichtetem Edelstahl bestehen, schützen sie effektiver vor Vereisung.
- C Die aus hochwertigem Edelstahl angefertigte Kammer ist in vier Unterkammern mit je drei Böden unterteilt. Daher können die Behälter sehr bequem und effizient befüllt werden.



• Alarmsystem mit Fernbedienung/Funksteuerung (optional)
- Wird aktiviert, wenn die Temperatur in der Kammer auf -65 °C ansteigt.
- Hauptsteuerung sendet Signal über Alarmstatus an das Alarmsystem, sofern angeschlossen, und das Alarmsystem stellt Telefonverbindungen her oder sendet Nachrichten.
- Es können mehrere Telefonnummern und Alarmnachrichten eingestellt und gespeichert werden.



• LCO2-Reservesystem (optional)
- ohne LCO2-Behälter